

Avantages pour les patients, les intervenants et les établissements de santé

- Le mécanisme d'inclinaison permet un repositionnement fréquent et aisé
- Sécuritaire et stable, il est conçu pour réduire les risques de blessures
- Son mouvement stimulant et satisfaisant fait de lui un fauteuil tout indiqué pour les patients atteints de troubles de la mémoire




Le bercement du siège permet de calmer l'agitation et d'absorber les mouvements rigides.



L'inclinaison vers l'arrière améliore la posture et contribue à une meilleure répartition de la pression.



Le mécanisme d'inclinaison situé à l'avant du siège favorise l'orientation visuelle et encourage le mouvement autonome grâce à l'autopropulsion par les pieds.

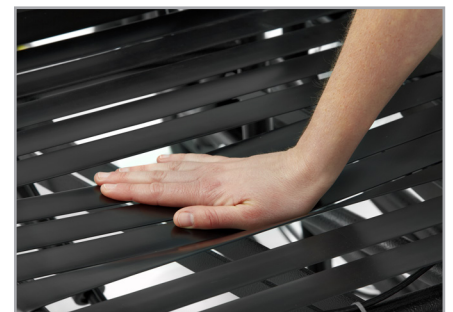

La technologie Comfort Tension Seating® assure un meilleur maintien et un confort prolongé en position assise.

Mobilité et liberté retrouvées pour les patients atteints de troubles de la mémoire

CARACTÉRISTIQUES

INCLINAISON	Jusqu'à 33° (avec le Mécanisme berçant)					
CAPACITÉ DE POIDS	250 liv. (113 kg)					
LARGEURS DU SIÈGE	16 in (40 cm)	18 in (40 cm)	20 in (50 cm)	22 in (55 cm)		
PROFONDEURS DU SIÈGE	15.5 in (39cm)	17 in (43 cm)	18.5 in (46 cm)			
HAUTEURS DU SIÈGE	14 in (35 cm)	15 in (51 cm)	16 in (55 cm)	17 in (59 cm)	18 in (45 cm)	19 in (48 cm)
ROUES - ROUES MAG	ROUES AVANT MAG 20 in (35 cm) or 22 in (55 cm)					
	ROUES ARRIÈRE MAG 20 in (35 cm) or 22 in (55 cm)					
ROUES - ROULETTES	AVANT Roulettes en aluminium 5 in (12 cm)					
	AVANT Roulettes à verrouillage total 5 in (12 cm)					
	ARRIÈRE Roulettes à verrouillage total 5 in (12 cm)					
CHÂSSIS GARANTI À VIE	Châssis en acier inoxydable 10 ANS					
REMBOURRAGE STANDARD	Coussinets latéraux supérieurs et inférieurs, coussin dorsal avec cliquer					



Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment des supports pour les pieds, des plateaux, des sangles de positionnement et bien plus encore!

[Cliquez ici pour voir les accessoires, les options de couleur, les formulaires de commande, et plus encore!](#)



Disponible avec l'option de siège solide.



COUSSIN LIBRA

Mousse - HR (haute résistance)
Mémoire de forme conçue avec le produit antimicrobien Ultrafresh pour une protection contre les odeurs, entoure le bassin et disposition du bord avant en cascade.



COUSSIN MULTI

Combinaison de mousse en trois parties
Mousse gel rafraîchissante et support immersif.



COUSSIN VI

Pour les hanches
Très doux, il contient de la mousse viscoélastique qui enveloppe et protège les saillies osseuses.



COUSSIN PSP

En gel de polymère
Le coussin moulé en gel de polymère garantit une protection supplémentaire de la peau et une réduction du cisaillement.

matrix®
SEATING SERIES